



取扱説明書



安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みになり、必ずお守りください。
この保護事項には人的傷害や物的損害を防ぐための注意事項を記載しています。

■ この取扱説明書では、安全上の注意事項を次の図記号で示しています。各図記号の意味を理解してから本文を読んでください。

 危険	誤った取扱いをしたときに、使用者に重大な身体的影響（死亡または重傷を含む）を与える可能性が大きい内容を示します。
 警告	誤った取扱いをしたときに、使用者に重大な身体的影響（死亡または重傷を含む）を与える可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害を負う可能性がある内容を示します。

■ 図記号の意味

	してはいけない「禁止」内容です。
	しなくてはならない「強制」内容です。

危険

	本製品は家庭および室内での使用のために設計されています。業務用には使用しないでください。製品故障の原因となることがあります。
	本製品は3歳未満のお子様には使用しないでください。3歳以上の幼児や身体的・感覚的・精神的機能が低下している方または経験・知識の乏しい方が使用する場合は、保護者が使用方法を指導し、その管理の下で使用してください。口腔内を傷つけたり、損傷する場合があります。
	幼児はこの器具で遊んではいけません。けがの原因となることがあります。
	管理する方がいなくなときに幼児が洗浄やメンテナンスを行ってはいけません。事故やけがの原因となることがあります。
	この取扱説明書に記載された用途にのみご使用ください。メーカーが推奨しない付属品は使用しないでください。製品故障の原因となることがあります。
	ペースメーカーやインプラントを使用している場合は、本製品を使用する前に医師に相談してください。事故やけがの原因となることがあります。

⚠ 警告

❗	音波振動ハブラシを初めて使うときは、強度1（最弱）で使用するをお勧めします。
	8週間に以内に歯科治療や口腔外科手術を受けた場合は、音波振動ハブラシを使用する前に歯科医師に相談してください。
	使用中に歯ぐきから出血し、1週間たってもおさまらない場合は、直ちに使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
	本製品を使用して不快感や痛みを感じた場合は使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
🚫	衛生上の理由から、交換ブラシは1人専用としてください。交換ブラシは3ヶ月毎に、または摩耗してきたらすぐに交換してください。スブリーデント 2ミニッツ 電動歯ブラシ™のみに使用してください。
	製造元または販売者アムウェイの許可なしに、製品を分解、修理、または改造しないでください。火災、感電、けがの原因となることがあります。
	取り扱いには十分ご注意ください。製品をたたいたり、落としたりしないでください。製品に欠陥がある場合は、直ちに使用を中止し、テクニカル・ホットラインに連絡してください。
	本製品は歯、歯ぐき、舌の汚れの除去専用であり、他の用途での使用を意図していません。本製品は商業的な目的や動物の治療を意図していません。製品故障の原因となることがあります。
🚫	3歳未満のお子様はご使用にならないでください。口腔内を傷つけたり、損傷する場合があります。
	極端に高温（41°C以上）になる場所、直射日光の当たる場所、熱源、引火しやすい場所には置かないでください。高温多湿を避けて保存してください。製品故障の原因となることがあります。
	充電中に充電口が濡れたときは使用しないでください。必ず付属の充電ケーブルと充電器スタンドをご使用ください。

⚠ 注意

❗	使用電圧が表示されている電圧に適していることを確認してから、電源またはコンセントに接続してください。製品故障の原因となることがあります。
🚫	エアゾールスプレーを使用する部屋や酸素吸入を行う部屋では使用しないでください。

スプリーデント 2ミニッツ 電動パワーブラシ™


理想的な効果を得るために、ご使用前に以下の説明をよくお読みください。

製品の内容物

- 本体 1個
- 交換ブラシ 3個
- 充電・UV除菌スタンド 1個
- USBケーブル 1個
- 取扱説明書 1部

製品の説明



交換ブラシ

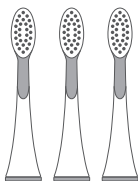

USBケーブル



取扱説明書

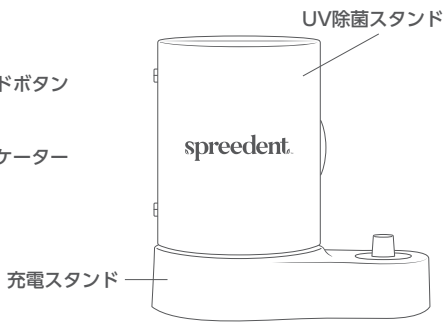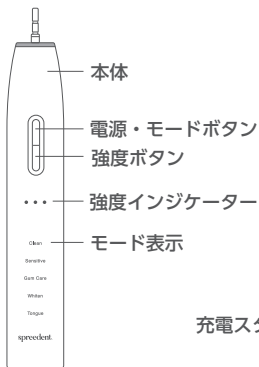

製品情報

製品名： スプリーデント 2ミニッツ 電動パワーブラシ™

形名： 127705J

電圧： 3.7V（ハブラシ）／5V（UVサニタイザー）

消費電力： 2W（ハブラシ）／3.5W（UVサニタイザー）

材質： 本体： ABS、TPE、PC

充電・UV除菌スタンド： ABS、シリコン

交換ブラシヘッド： ポリプロピレン、ポリアセタール、スチレン系熱可塑性
エラストマー（TPS、TPE-S）

交換ブラシ毛： 飽和ポリエステル樹脂

サイズ： 本体： 185.3 × 28.8 × 28.0mm

257mm（ブラシ付）

UVサニタイザー： 133.7 × 59.9 × 131.8mm

耐熱温度： 60℃

毛の硬さ： やわらかめ

充電時間： 16時間

使用温度： 室温0～35℃で使用・保管する

原産国： 本体： 中国製

交換ブラシ： 韓国製

充電・UV除菌スタンド： 中国製

USBケーブル： 中国製

重さ： 交換ブラシ： 18g

本体： 136g

充電・UV除菌スタンド： 160g

仕様

バッテリー容量	リチウムイオン/1500mAh
耐水性	IPX7*1
感染保護クラス	Ⅱ*2
充電方法	USB A - DC 3.5V電源ケーブル

*1 IPX7：水深1mに30分間沈めた場合の水の侵入に対する保護を示します。

*2 感電保護クラスⅡ：二重または強力な絶縁によって感電から保護されます。

特徴

1. 毎分32,000回的高速振動で歯垢を落とします。
2. 5つのブラッシングモード：クリーン、センシティブ、歯茎ケア、ホワイティング、舌ケア。
各ブラッシングモードに快適に使用するための3つの強度レベルがあります。
 - クリーン：歯と歯間の洗浄を中心に行います。
 - センシティブ：歯ぐきの敏感なゾーンをやさしくブラッシングします。
 - 歯茎ケア：さまざまな振動パターンと強度の調節により、歯と歯ぐきをブラッシングします。
 - ホワイティング：歯面の汚れを集中的に落とします。
 - 舌ケア：ブラシ裏側の舌ブラシが舌の汚れを落とします。
3. 圧力センサー：圧力がかかりすぎると振動が小さくなり、すべてのインジケーターが点滅します。
4. UV除菌スタンド：ハミガキ後に付属のUV除菌スタンドにブラシを入れるとUV除菌し、ブラシを清潔に保てます。
5. 高耐久性リチウム電池：バッテリーは、満充電で約70日間（最大値）使用でき（クリーンモード、強度：高で使用した場合）、充電不足時は表示されます。
6. アンチスプラッシュ機能：ハブラシのスイッチを入れると、3秒間振動が弱くなり、歯磨き粉が飛び散るのを防ぎます。
7. 本体は人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
8. 防水はIPX7クラス：水深1mの水の中に30分間沈めたときの水の浸入に対する保護を示しています。
9. スマートリマインダー機能：30秒毎にリマインダー機能として一時停止します。2分経過した時点で自動停止します。

ブラッシング方法

1. ブラシを本体に取り付け、所定の位置に固定していることを確認します。毛を濡らし、歯磨き粉を適量つけてください。
2. ブラシを口に入れ、本体の電源・モードボタンを長押しすると電源が入ります。
3. 本体の電源・モードボタンを押すと、5つのモード（クリーン、センシティブ、歯茎ケア、ホワイティング、舌ケア）を選択できます。
4. 強度ボタンを押すと、3つの強度（低、中、高）の切り替えが選択できます。
5. スマートリマインダー機能が30秒経過毎に一時停止し、開始から2分後に自動停止します。口の中を上下、左右の4エリアに分け、各エリア30秒かけてブラッシングします。
6. 歯と歯茎の境目を磨く際は、歯に対して45度になるようにブラシを当てゆっくり動かしします。歯の表面を磨く際は、歯に対して90度になるようにブラシを当てゆっくり動かしします。
7. 本体に圧力センサーが搭載されているので、ブラッシング中に力を入れすぎた場合に警告してくれます。
8. 歯を磨き終えたら、ブラシと本体を流水で洗い、布やタオルで拭いてください。
9. 本体を充電器スタンドに戻します。ブラシをUV除菌スタンドに戻します。
* 本体がぬれている状態で充電しないでください。



充電方法

1. モード表示が点滅したり、本体の電源が入らない場合は、本体を充電してください。本体の充電には、専用の充電スタンドをご使用ください。
2. 充電中は、モードが下から上に向かってゆっくりと点灯し、完全に充電されるまで繰り返しします。
3. 充電が完了すると、すべてのインジケーターが消灯します。満充電にするには、本体を約16時間充電しておく必要があります。

推奨事項：本体の電池寿命を保つために、定期的（2～3週間毎など）に充電することをお勧めします。


注意：充電器スタンドと本体は、充電中に少し熱を持ちます。

充電池について（本製品は充電池を内蔵しています）


- 充電池は消耗品です。（保証対象外）
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。

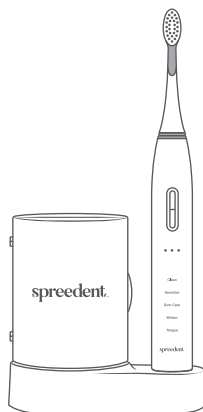

UVクリーニングの説明

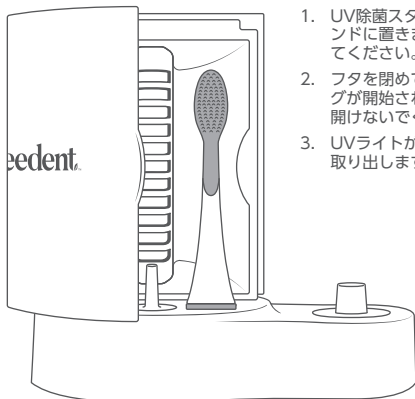

1. UV除菌スタンドのフタを開けてブラシをスタンドに置きます。毛をUVランプの方に向けてください。
2. フタを閉めてください。自動的にクリーニングが開始されます。クリーニング中はフタを開けないでください。
3. UVライトが消えたら、フタを開けてブラシを取り出します。

注意：歯ブラシの毛先から水がたれるほど濡れている場合は水気をふき取ってから入れてください。

メンテナンス

クリーニングを行う前に、機器の電源が入っていないことを確認してください。

充電スタンド

充電スタンドはやわらかい布で汚れを拭き取ってください。

充電スタンドを水に浸けないでください。

ハブラシ

1. 本体からブラシを取り外します。
2. 本体の表面の汚れを柔らかい布でふき取ってください。本体を水につけないでください。
3. 使用後はブラシと毛をよくすすいでください。
4. 本体や交換ブラシなどの部品は食洗器で洗わないでください。

推奨事項：衛生上の理由と最適なブラッシングのために、交換ブラシは2～3ヶ月毎に定期的に交換することをお勧めします。

廃棄物

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

廃棄の際は、お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

使用をやめて充電器のプラグを抜き、テクニカル・ホットラインにお問い合わせください。修理はこの製品の品名「スプリードント 2ミニッツ 電動パワーブラシ™」、および故障の状態をお伝えください。

保証について

保証期間 - お買い上げ日から1年間

保証の対象は本体と充電・UV除菌スタンド、USB充電ケーブルのみとなります。ブラシヘッドとその他付属品は保証の対象外です。

保証期間中でも有償修理になることがありますので、無償修理規定をよくお読みください。

(無償修理規定)

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償修理をします。ただし、この対象は本体と充電・UV除菌スタンドのみとなります。交換ブラシと付属品は保証の対象外です。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、テクニカル・ホットライン 0120-950-987(フリーダイヤル)にご依頼のうえ、本書と共に、指定する修理センターへ製品をお送りください。
3. 保証期間内でも、次の場合には、有償修理となります。

- イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
- ロ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷
- ハ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷
- ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障・損傷
- ホ) 日本国外で使用して発生した不具合
- ヘ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
- ト) 日本アムウェイ合同会社またはABO(アムウェイビジネスオーナー)から直接購入されていない場合
- チ) リチウム電池の寿命による故障・損傷
- リ) スプリードント 2ミニッツ 電動パワープラシTM用として日本アムウェイ合同会社が別売りしている交換ブラシ以外が使用されている場合

4. 製品保証は日本国内においてのみ有効です。

<ご不満による返品および交換について>

本製品に万一何らかのご不満が生じた場合は、「100%現金返済保証制度」にそって製品を返品することができます。この制度は、「特定商取引に関する法律」に定める「クーリング・オフ」の制度を、さらに前進・徹底させた日本アムウェイ独自のルールで、ABO(アムウェイビジネスオーナー)の場合は、一定条件のもとで、起算日^{*1}から1年以内を期限として、本製品を返品することができ、製品代金は全額返金されます。ただし、製品または納品書もしくはお客様による販売伝票の受領日のうち最も遅い日から30日を超えた使用済みの場合には返品することができません。プライムカスタマーの場合は、納品書兼返金・返品依頼書に表示されている受注日の翌日から45日以内は、使用・未使用にかかわらず返品することができます。なお、製品ご購入時にお支払いいただいた送料・手数料などの製品代金以外の費用は、返金の対象とはなりません。製造上の不良が発見された場合は、同一製品と交換することができます。返品・交換に関するその他の条件・ご注意・手続き方法に関する詳細は、お手元のアムウェイ カタログやamwaylive.comをご参照ください。お客様におかれましては、お知り合いのABO(アムウェイビジネスオーナー)にご確認ください。

^{*1} 1. 起算日とは、「納品書兼返金・返品依頼書」もしくはデジタル納品書に表示されている受注日またはお客様さまによる販売伝票の受領日のうち最も遅い日を指します。

【お問い合わせ先】

日本アムウェイ合同会社
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町7-1
www.amway.co.jp

テクニカル・ホットライン 0120-950-987 (フリーダイヤル)
(受付時間 月～土/9:00~17:00 日・祝はサービス休止)
携帯電話からは 0570-064-632 (通話料有料)

